

Masajeador cervical de cuello y espalda

Manual de configuración



INTRODUCCION DE EL PRODUCTO

Campos cervicales HX-5880 con curvatura fisiológica cervical humana compuesta de diseño circular aerodinámico, usando electroterapia de baja frecuencia. Terapia magnética, fisioterapia multicanal sincrónica de tracción circular para formar un campo constante eficiente, a través de tejido más profundo colectivo y la médula ósea. A lo largo de la terapia, se mantiene la postura fisiológica correcta y la fisioterapia correcta de la espondilosis cervical ha proporcionado una plataforma científica. Permitiendo en el hogar un tratamiento de sistema de energía multicinético fácil, eficiente y agradable, que le permitirá obtener un mayor disfrute del producto.

APLICACIONES DE EL PRODUCTO


Puede promover la circulación sanguínea, relajar los músculos locales y lograr el propósito de reducir la inflamación, la hinchazón, aliviar el dolor y aliviar la fatiga. Aplicable para dolor cervical, entumecimiento del brazo, de el hombro, dolor de cabeza y mareos.

CARACTERISTICAS DE EL PRODUCTO

Diseño ergonómico, estética de curvatura para el cuello. Fuente de alimentación de baterías en 2 secciones, uso seguro y confiable. El pulso eléctrico de baja frecuencia, el efecto magnético y la tracción de el anillo pueden formar un campo de energía compuesto eficiente. Usando la ultima tecnología de unión inteligente 3d, puede ajustar el electrodo fácilmente de acuerdo con la curva de su cuello y es mas cómodo con el cableado externo. Cuenta con 3 tipos de terapia de combinación automática, 3 tipos de terapia manual, que se pueden seleccionar según sus diferentes necesidades y usar ampliamente, Hay muchos imanes de salud integrados en el cuerpo y la terapia magnética se usa para regular el equilibrio de el YING Y YANG opera mejorar la microcirculación muestra una luz led indicadora de el modo de operación que este realizando en ese momento.

ESTRUCTURA PRINCIPAL DE EL PRODUCTO

Los recuperadores se componen principalmente de placas conductoras, parche de gel imán , batería interna y los componentes de el producto se muestra a continuación

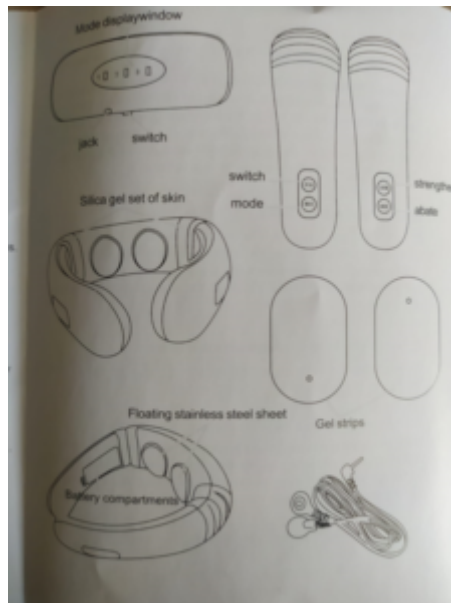

METODO DE OPERACIÓN

1 FUNCIONAMIENTO D ELA FUENTE DE ALIMENTACION

Conecte el cable mini USB (V8) a la diadema para cargar la batería interna

PASOS DE LAS FUNCIONES

Una vez cargada la batería , coloque el botón central en la posición de (ON)

Use una toallita húmeda para limpiar la parte cervical y la placa conductora, luego coloque los parches cerca de el cuello en la parte superior de la espalda, también deberá limpiar esa área antes de colocarlos.

2 oprima el botón de ON que hay en el lado izquierdo de el masajeador, y en seguida la tecla de modo , si elige seleccionar solo una vez el botón de modo, entrara en modo automático por un tiempo de 15 minutos con los botones de el lado derecho podrá elegir la intensidad de el masaje,

Cuenta con 6 modos de masaje que a continuación se describen.

Modo 1 combinación automática luz indicadora de modo 1
brillante

Modo 2 acupuntura, luz indicadora de modo brillante

Modo 3 empuje, luz indicadora de modo brillante

Modo 4 presión , luz indicadora de modo 1 y 3 simultáneamente
brillante

Modo 5 amasado, luz indicadora de modo 1 y 2 brillando
simultáneamente

Video Manual