

# Masajeador Facial Elimina Papada

## Manual de Configuraciones Básicas



---

El instrumento de belleza facial 01 V es un salón de belleza portátil equivalente al instrumento para el cuidado de la piel. Utiliza seis modos de terapia de luz de calor para penetrar profundamente en la capa de piel real, estimular el crecimiento celular y la circulación sanguínea, reponer la humedad de la piel y retrasar el envejecimiento de la piel. Combinado con modo vibración, apriete el contorno,

mejore la sensación tridimensional, dé forma a la cara en V, mejore la fuerza muscular de los músculos finos, mejore la circulación sanguínea, ayude a reparar y mantenga la piel elástica, haga que la capa externa de los nutrientes de la piel penetre en la dermis de la piel, adelgace y haga el rostro más fino.

Disfruta de un masaje SPA diferente para tu piel. Antes de usar el dispositivo de belleza V face por primera vez, lea y comprenda las instrucciones, precauciones e información de seguridad de este dispositivo de cuidado y utilícelo de acuerdo con sus pautas. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el servicio posventa.

---

#### ESTRUCTURA DEL PRODUCTO:

1 interruptor de carga

2 área de emisión de luz y calor

3 control remoto


4 Encendido/apagado

5 botón de modo

6 Indicador de carga

7 selección de intensidad

8 Pantalla del control remoto

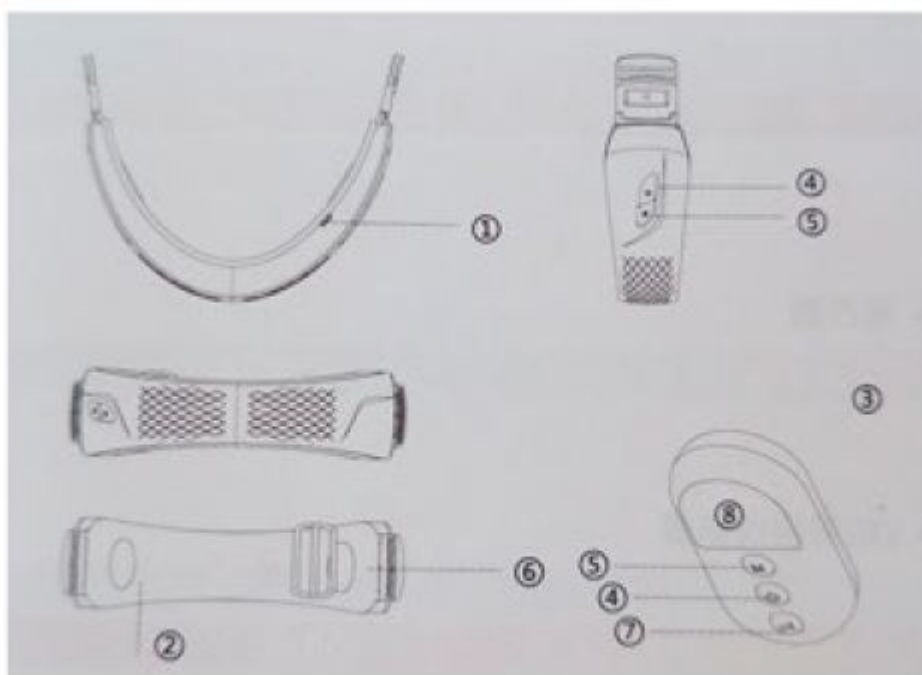

# Cómo usar el instrumento de belleza V-FACE



El V-FACE utiliza un dispositivo de control de temperatura inalámbrico para controlar y soltar. Para un uso independiente se puede realizar colocando la pieza de ajuste del instrumento, la parte inferior debe ajustarse perfectamente al rostro.



Mantenga presionado el botón de encendido durante 1 segundo de igual forma el botón del control. La alimentación está encendida, lista para usar. El controlador cuenta con dos teclas a lado, las cuales realizan un ruido al ser pulsadas.



Botón M del control: selección en modo toque  
Hay 6 modos de uso para el V-FACE:  
\*Apretar contornos.  
\*Dar forma de V al rostro.  
\*Terapia magnética de baja frecuencia.  
\*Esteriliza y reduce la hinchazón.  
\*Limpia el acné.

Cada vez que presiones la tecla M, ya sea en el V-FACE o en el control, pasará al siguiente modo

## FUNCIÓN DESCRIPTIVA

Contorno firme: EMS + Luz azul

Forma de V: EMS

Terapia de baja frecuencia: EMS + Luz roja

Esterilización e hinchazón: luz roja + EMS + calefacción

Belleza limpiadora de acné: luz roja

Fotorejuvenecimiento: luz azul + EMS + vibración



---

## INTRUCCIONES DE USO



Puede presionar la tecla de ajuste de intensidad del engranaje(M) para ajustar la intensidad. La intensidad predeterminada del dispositivo es Ninguna. Cada vez que presione la tecla de ajuste de intensidad, la intensidad aumentará en uno. Después de la intensidad más alta, presione el botón una vez para volver a Ninguno (presione prolongadamente La tecla de intensidad es para cancelar toda la intensidad actual) presione de nuevo para volver al modo de baja intensidad.



Quítese el instrumento de belleza facial V y guárdelo en un lugar fresco y seco.



La carga del instrumento de belleza deja de funcionar, la luz roja de carga está encendida, la luz azul está encendida cuando la batería está llena y el símbolo de la batería del control remoto: cuando la batería está llena, el nivel de la batería muestra que las 4 luces están encendidas. Si el dispositivo está agotado, conecte el cable USB al dispositivo y conéctelo a la fuente de alimentación para cargarlo.

---

## **INTRODUCCION A LA TERAPIA DE VIBRACIÓN E IPL: Las cuatro terapias principales del medidor de cara V:**



**Irradiación de luz roja:** mejora la actividad de las células de la piel, promueve el metabolismo y permite que la piel secrete una gran cantidad de colágeno y llene el tejido fibroso. Promueve la circulación sanguínea, mejora la elasticidad de la piel, anti envejecimiento, anti oxidación, reparación de la piel.



**Irradiación de luz azul:** puede inhibir rápidamente la inflamación común de la piel, calmar la piel y regular la secreción de queratinocitos, limpiar y esterilizar la piel, y fortalecer la absorción, reparación y equilibrio de la piel. Aceite para la piel, blanquea las manchas, rejuvenece la piel, encoge los poros.



**Micro corriente EMS:** libera corriente de pulso intermitente para estimular la producción de ATR, estimula el tejido subcutáneo humano a través de la micro corriente EMS, mejora la elasticidad de la fibra muscular facial, activa la actividad del colágeno y tensa la piel.



**Vibración:** calma los músculos faciales, mejora la fuerza de los músculos finos, aumenta la elasticidad facial, levanta la cara, aprieta los músculos faciales y da forma a la cara en V.